

# flipstick



*Mehr Bewegungsfreiheit.*





schwarz



grün



7703

### Neu! „Wandhalter & Stockhalter mit Schiene“

Modell 7555

- 50 oder 90 cm Länge



### „Toolflex Stockhalter Set“

Modell 424-2

Das Toolflex Stockhalter Set gibt endlich sicheren Halt für Ihre Gehhilfen und Gehstöcke, ob an Rollstühlen oder Rollatoren.

Auch an allen anderen runden Befestigungsmöglichkeiten werden sie den Stockhalter nicht mehr missen wollen.



### Flipstick „Original Standard“

Modell 7701

- Stocklänge 87 cm
- Sitzhöhe ca. 75 cm
- Stockgewicht: ca 500 gr

Farben: *schwarz, grün, Sonderfarben*

Die Stocklänge kann eingekürzt werden.

### Flipstick „Standard, verstellbar“

Modell 7704

- Stocklänge 87–91 cm
- Sitzhöhe ca. 75–80 cm
- Stockgewicht: ca 600 gr

Farben: *schwarz, grün*

Stock- und Sitzhöhe sind verstellbar.

### Flipstick „Extra Lang“ schwarz

Modell 7702

- Stocklänge 92 cm
- Sitzhöhe ca. 80 cm
- Stockgewicht: ca 550 gr
- für Körpergrößen über 180 cm

Farbe: *schwarz*

Die Stocklänge kann eingekürzt werden.

### Flipstick „Faltbar“

Modell 7703

Faltbar, mit Tragetasche.

- Stocklänge 87 cm
- Sitzhöhe ca. 75 cm
- Stockgewicht: ca 500 gr

Farben: *schwarz, grün, Sonderfarben*

Die Stocklänge kann eingekürzt werden.

### Flipstick „Faltbar & verstellbar“

Modell 7706 (o. Abb.)

- Stocklänge 87–91 cm
- Sitzhöhe ca. 75–80 cm
- Stockgewicht: ca 600 gr

Farbe: *schwarz*

Stock- und Sitzhöhe sind verstellbar.

\* *Sonderfarben saisonal in begrenzter Stückzahl nur unter [www.flipstick.de](http://www.flipstick.de) erhältlich.*

## Der Spazier- und Sitzstock für mehr Bewegungsfreiheit

Schon über 3 Millionen Menschen genießen die neue Bewegungsfreiheit, die Ihnen Flipstick bietet. Der Flipstick wurde für Menschen entwickelt, die beim Gehen ein bisschen Hilfe brauchen. Das Praktische: Der Flipstick ist nicht nur ein federleichter Spazierstock, sondern auch ein bequemer Sitzstock, mit dem man sich jederzeit und an jedem Ort ausruhen kann.

*Mit dem Flipstick geht sich's einfach besser.*

Längere Wege lassen sich wieder besser bewältigen. Erhalten Sie sich Ihre Selbständigkeit: Denn wer gut gehen kann, dem geht's auch besser.




Der Flipstick besteht aus einem Aluminium-Stock und einem körpergerecht geformten und ausklappbaren Kunststoff-Sitz. Er ist federleicht, stabil und sicher. Die Standard Modelle wiegen z.B. unter 600 Gramm, er trägt bis zu 130 Kilogramm und ist – dank Gummifuß – rutschfest. Wenn der Spaziergänger ein kleines Püschchen einlegen möchte, wird die Sitzfläche einfach aufgeklappt und – mit dem patentierten Fixier-Knopf – auf der gewünschten Sitzhöhe sicher fixiert. Wenn es wieder weitergehen soll, wird der Sitz einfach zusammengeklappt. Die verstellbaren Modelle können mit einem Druck auf den Fixier-Knopf auf die persönliche Laufhöhe sicher festgestellt werden.

Den Flipstick gibt es in verschiedenen Farben und Varianten, z.B. besonders lang oder zum Zusammenfallen.

Neu ist der faltbare und verstellbare Flipstick, der sämtliche Funktionen vereint. Die faltbaren Modelle werden mit einer farblich passenden Nylonumhängetasche geliefert. Wer auch mal wieder Wald und Flur genießen möchte, der kann den Flipstick-Geländeaufsatz verwenden. Der rutschfeste Gummifuß eignet sich für fast jeden Untergrund sowohl innen wie außen.

*Unter den zahlreichen Flipstick Modellen wird auch für Sie etwas passendes dabei sein!*

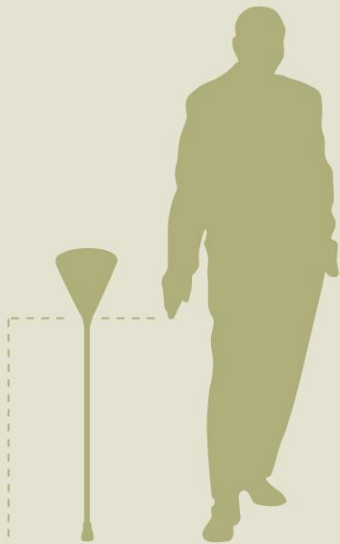

Sitzbreite ca. 20 cm



Sitzlänge ca. 23 cm

**acti**v**era**®

**activera · Flipstick**  
*Inh. Sabine Wotschke*

An der Masch 5 B  
31191 Algermissen

Tel. 0800/0000-94 49 (gebührenfrei)

Fax 0180/5252-115

Email: [sitzstock@flipstick.de](mailto:sitzstock@flipstick.de)

Web: [www.flipstick.de](http://www.flipstick.de)

## Welcher Stock passt zu mir?

Ihr Flipstickmodell sollte bequem beim Gehen sein und Ihnen einen guten Sitzkomfort bieten.

Wir empfehlen daher die verstellbaren Modelle, wenn durch die Verstellmöglichkeit die Stocklänge beim Gehen erweitert und/oder die Sitzposition beim Ausruhen erhöht werden soll.

Möchten Sie den Flipstick mit Ihrem Partner teilen und unterscheidet sich dessen Körpergröße von der Ihren, dann kann es ebenfalls sinnvoll sein, ein verstellbares Stockmodell zu wählen.

Die faltbaren Modelle empfehlen wir, wenn Sie den Stock nur zeitweise, z.B. im Museum, beim Einkaufen oder im Urlaub benutzen möchten. Die Faltechnik ermöglicht Ihnen ein platzsparendes Verstauen in der übrigen Zeit. Die bei jedem faltbaren Flipstick mitgelieferte, farblich passende Nylon-Umhängetasche erlaubt einen schnellen, unkomplizierten und komfortablen Transport und Zugriff für den Bedarfsfall.

## Wie ermittle ich die richtige Stockhöhe ?

Um eine ausreichende Stützfunktion und angenehme Sitzposition zu erreichen, ist es notwendig, dass der Stock in der richtigen Höhe individuell angepasst wird.

Um ein ermüdungsfreies Gehen-mit-Stock zu erreichen, sollten Sie eine aufrechte Haltung bei leicht angewinkeltem Ellbogen einnehmen. Das Körpergewicht wird beim Stützen auf den Stock übertragen und das Gehen wird erleichtert .

Überprüfen Sie die Länge Ihres Flipstick. Stellen Sie den Stock dazu auf den Boden, der Sitz sollte dabei nicht ausgeklappt sein. Lassen Sie die Arme locker nach unten hängen.

Die Spitze der Dreiecks-Sitzfläche sollte an den Fingerspitzen enden. Ist der Stock zu lang, so können Sie diesen bequem mit einer Metallsäge einkürzen oder bei den verstellbaren Modellen die Stockhöhe verändern.