

flipstick



Produktvideo auf
www.flipstick.de



Mehr Bewegungsfreiheit.



Der Spazier- und Sitzstock für mehr Bewegungsfreiheit

Schon über 3 Millionen Menschen weltweit genießen die neue Bewegungsfreiheit, die Ihnen Flipstick bietet. Der Flipstick wurde für Menschen entwickelt, die beim Gehen ein bisschen Hilfe brauchen. Das Praktische: Der Flipstick ist nicht nur ein federleichter Spazierstock, sondern auch ein bequemer Sitzstock, mit dem man sich jederzeit und an jedem Ort ausruhen kann.

Mit dem Flipstick geht sich's einfach besser.

Längere Wege lassen sich wieder besser bewältigen. Erhalten Sie sich Ihre Selbständigkeit:

Denn wer gut gehen kann, dem geht's auch besser.



Der Flipstick besteht aus einem Aluminium-Stock und einem körpergerecht geformten und ausklappbaren Kunststoff-Sitz. Er ist federleicht, stabil und sicher. Die Standard Modelle wiegen z.B. unter 600 Gramm, er trägt bis zu 110 Kilogramm und ist – dank Gummifuß – rutschfest.

Wenn der Spaziergänger ein kleines Päckchen einlegen möchte, wird die Sitzfläche einfach aufgeklappt und – mit dem patentierten Fixier-Knopf – auf der gewünschten Sitzhöhe sicher fixiert. Wenn es wieder weitergehen soll, wird der Sitz einfach zusammengeklappt.



Bei verstellbaren Modellen läßt sich die Sitz- bzw. Gehhöhe individuell 4-fach verstellen.



Den Flipstick gibt es in verschiedenen Farben und Varianten, z.B. besonders lang oder zum Zusammenfallen.



Neu ist der faltbare und verstellbare Flipstick, der sämtliche Funktionen vereint. Die faltbaren Modelle werden mit einer farblich passenden Nylonumhängetasche geliefert.

Für Spaziergänge am Strand oder im Wald, abseits von befestigten Wegeflächen, ist ein Spikefuß für moorastige, weiche oder sandige Böden erhältlich.

Für die Wintermonate ist für die Sitzstöcke als Zubehör eine Eiskralle erhältlich. Unter den zahlreichen Flipstick Modellen wird auch für Sie etwas Passendes dabei sein!



Nützliches Flipstick Zubehör



Eiskralle
Artikel 146600



Spikeaufsatz
Artikel 8205



Ersatzfüße
Artikel 8201



Erhältlich
in den Farben

Zu den faltbaren Modellen
erhalten Sie gratis die
passende Umhängetasche



Toolflex – Das genial-einfache Haltesystem



Stockhalter

für D=15–20 mm, Art. 475021
für D=20–30 mm, Art. 475121
für D=30–40 mm, Art. 475221



Wandschienen

Länge=20 cm, Art. 485520
Länge=50 cm, Art. 485550
Länge=90 cm, Art. 485590



Stochhaltersets für die Montage z.B. an Rollstuhl oder Rollator

Art. 475921 Stochhalterset
Lieferumfang:
1 St. Stockhalter 20–30 mm
1 Köcher
2 St. Rohklammern für
D= 19+22 cm

Flipstick Sitzstock Modell

1 Flipstick „Extra kurz“

Modell 7801

- Stocklänge 82 cm
- Sitzhöhe 70 cm

Farbe: grün oder schwarz

2 Flipstick „Standard“

Modell 7701

- Stocklänge 87 cm
- Sitzhöhe 75 cm

Farbe: blau, grün oder schwarz

3 Flipstick „Extra lang“

Modell 7702

- Stocklänge 92 cm
- Sitzhöhe 80 cm

(nur in schwarz erhältlich)

4 Flipstick „Verstellbar“

Modell 7704

- Stocklänge 4-fach verstellbar 87–91 cm
- Sitzhöhe 75–80 cm

Farbe: blau, grün oder schwarz

5 Flipstick „Faltbar extra kurz“

Modell 7803

- Stocklänge 82 cm
- Sitzhöhe 70 cm

Farbe: grün oder schwarz

(inkl. farblich passender Umhängetasche)

6 Flipstick „Faltbar Standard“

Modell 7703

- Stocklänge 87 cm
- Sitzhöhe 75 cm

Farbe: blau, grün oder schwarz

(inkl. farblich passender Umhängetasche)


7 Flipstick „Faltbar & Verstellbar“

Modell 7706

- Stocklänge 4-fach verstellbar 87–91 cm
- Sitzhöhe 75–80 cm

Farbe: blau, grün oder schwarz

(inkl. farblich passender Umhängetasche)

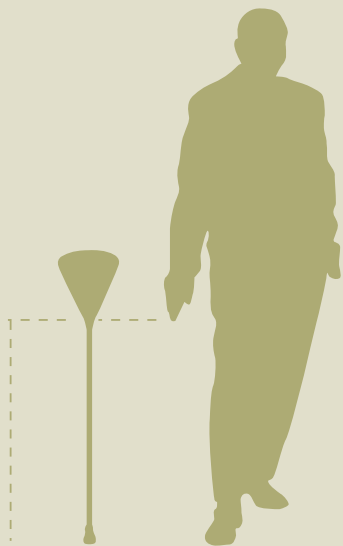

Sitzbreite ca. 20 cm



Sitzlänge ca. 23 cm

Welcher Stock passt zu mir?

Welches Modell zu Ihnen passt, richtet sich entscheidend nach der Körpergröße. Ab einer Körperlänge von 170 cm haben Sie die Wahl zwischen den Standardmodellen (7701), den faltbaren Modellen (7703) oder den Höhenverstellbaren (7704 u. 7706).

Für Personen mit Übergröße (ab 180 cm) ist der Flipstick "Extra Lang" ideal. Für Körpergrößen unter 170 cm sind die Modelle 7801 und 7803 geeignet.

Alle Flipstick Modelle können jedoch zusätzlich von Ihnen auf die individuelle Körpergröße mit einer handelsüblichen Metallsäge eingekürzt werden.

Die faltbaren Sitzstöcke (7803 u. 7706) ermöglichen ein platzsparendes Verstauen bei Nichtbenutzung.

Die bei jedem faltbaren Stock mitgelieferte, passend farbliche Umhängetasche, erlaubt einen komfortablen Transport, ob als Handgepäck auf Reisen oder beim Spazieren Gehen.

Dank innovativer Faltechnik – da selbstentfaltend – ist dieser schnell und unkompliziert bei Bedarf sofort einsatzbereit.

Wie ermittle ich die richtige Stockhöhe ?

Um eine ausreichende Stützfunktion und angenehme Sitzposition zu erreichen, ist es notwendig, dass der Stock in der richtigen Höhe individuell angepasst wird.

Um ein ermüdungsfreies Gehen-mit-Stock zu erreichen, sollten Sie eine aufrechte Haltung bei leicht angewinkeltm Ellbogen einnehmen. Das Körpergewicht wird beim Stützen auf den Stock übertragen und das Gehen wird erleichtert.

Überprüfen Sie die Länge Ihres Flipsticks. Stellen Sie den Stock dazu auf den Boden, der Sitz sollte dabei nicht ausgeklappt sein.

Lassen Sie die Arme locker nach unten hängen.

Die Spitze der Dreiecks-Sitzfläche sollte an den Fingerspitzen enden. Ist der Stock zu lang, so können Sie diesen bequem mit einer Metallsäge einkürzen oder bei den verstellbaren Modellen die Stockhöhe verändern.

acti**vera**®

activera • Flipstick

Inh. Sabine Wotschke

An der Masch 5b

31191 Algermissen

Tel. 0180 - 540 25 25*

Fax. 0180 - 5252-115*

eMail: sitzstock@flipstick.de

Web: www.flipstick.de